


Our Commitment Remains: MOSAIQ Quick Guides for You

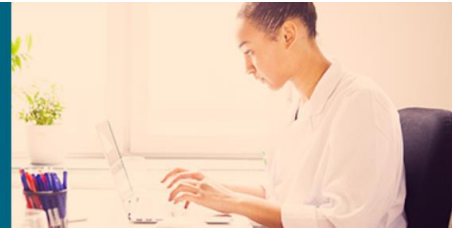

Elekta Oncology インフォマティクスチームは、MOSAIQ ワークフローを最大化して、医療従事者の皆様が運用上の課題に適応できるよう支援します。

便利なヒントを簡単に参照できるように、以下に目的別の MOSAIQ クイックガイドを示します。

Tips 目次 (クリックするとページにジャンプします)

【COVID-19 に関する情報をまとめるための設定方法】	2
患者チャートに、COVID-19 の情報をまとめるためのタブページを設定する	2
COVID-19 に関する文書タイプを追加する	3
COVID-19 に関するメモタイプを追加する	4
【参考】 COVID-19 のタブページのサンプル	5
【注意喚起を行うための設定方法】	6
患者を開いた際、COVID-19 に関する警告をポップアップで表示する	6
患者チャートの“注意事項”に、COVID-19 に関する情報を表示する	10
スケジュールを開いた際、COVID-19 に関する情報をポップアップで表示する	14
患者スケジュールに、COVID-19 を示すステータスを設定する	16
【経過観察を行うための設定方法】	20
経過観察を行うため、COVID-19 に関するアセスメントを作成する	20
経過観察を行うため、COVID-19 に関するアセスメントを設定する	22
作成および設定したアセスメントを患者チャートに表示する	24
COVID-19 の ICD コードを追加する	28

※ 操作・設定でご不明な点がございましたら、弊社ケアサポートセンターまでご連絡ください。

エレクタケアサポートセンター

0120-659-043

Email ecsc@elekta.com

Fax 03-6436-4233



【COVID-19 に関する情報をまとめるための設定方法】


患者チャートに、COVID-19 の情報をまとめるためのタブページを設定する

Headline


患者チャートに、COVID-19 専用のタブを追加します。

How To

- 1) 任意のタブを右クリックし、[タブの追加] をクリックしてください。

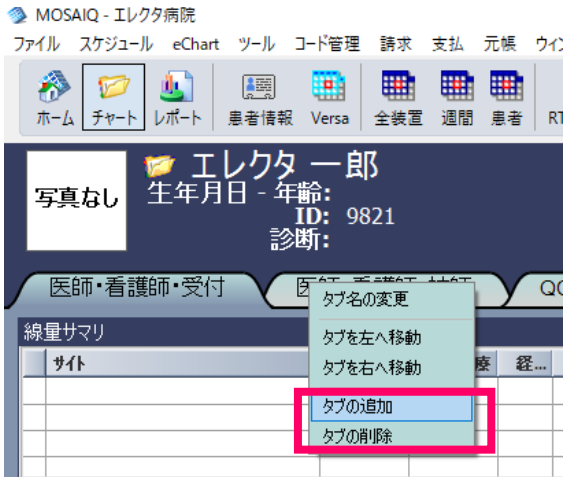

- 2) タブのラベルに、“COVID Status” と入力してください。

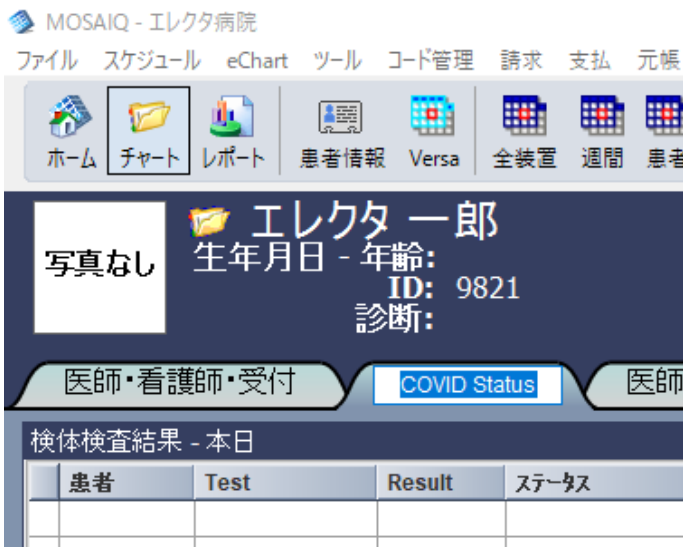

- 3) 関連するコンテンツを追加します。

(画面設定のサンプルについては、[こちらのページ](#)を参照ください)




COVID-19 に関する文書タイプを追加する

Headline

COVID-19 に関する文書のタイプを追加します。


How To

1) [ファイル] > [ライブラリ] > [文書タイプ]をクリックしてください。

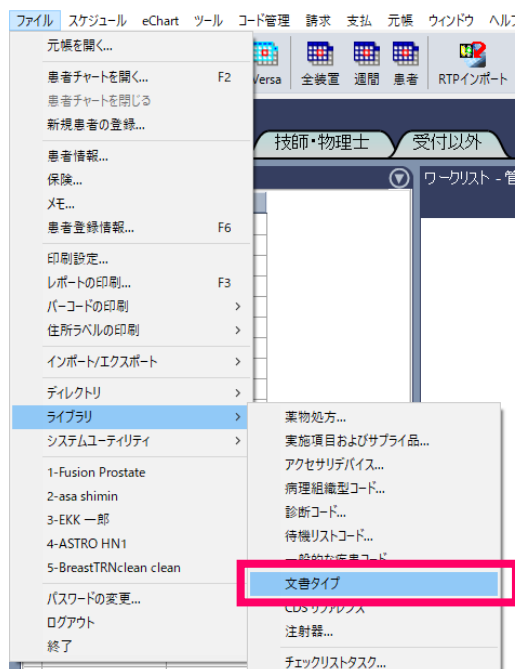

2) “文書タイプ マネージメント” のウィンドウが開きます。[追加]をクリックしてください。

3) 文書タイプを入力し，“部門/施設” を選択してください。（通常は “RO” または “グローバル”）

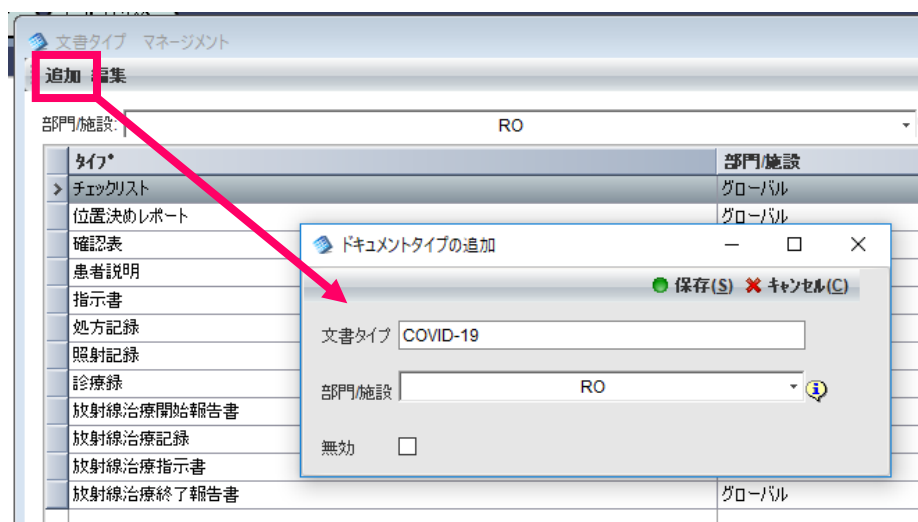


COVID-19 に関するメモタイプを追加する

Headline

COVID-19 に関するメモタイプを追加します。


How To

1) [ファイル] > [システムユーティリティ] > [部門/施設の設定] をクリックしてください。

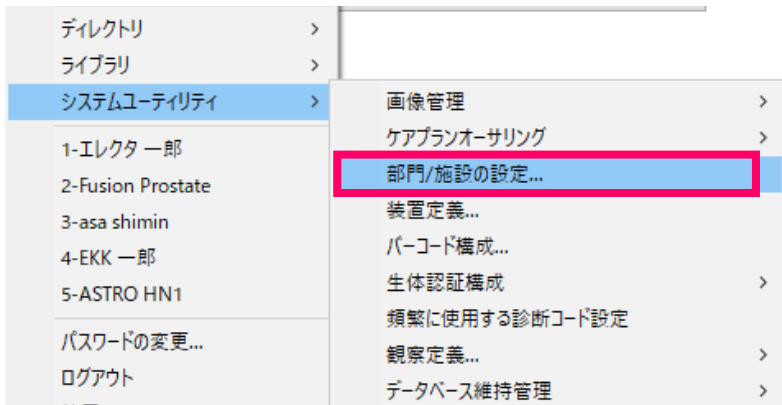


2) “部門/施設の設定” のウィンドウが開きます。


[管理] タブをクリックし、[メモタイプ] をクリックしてください。

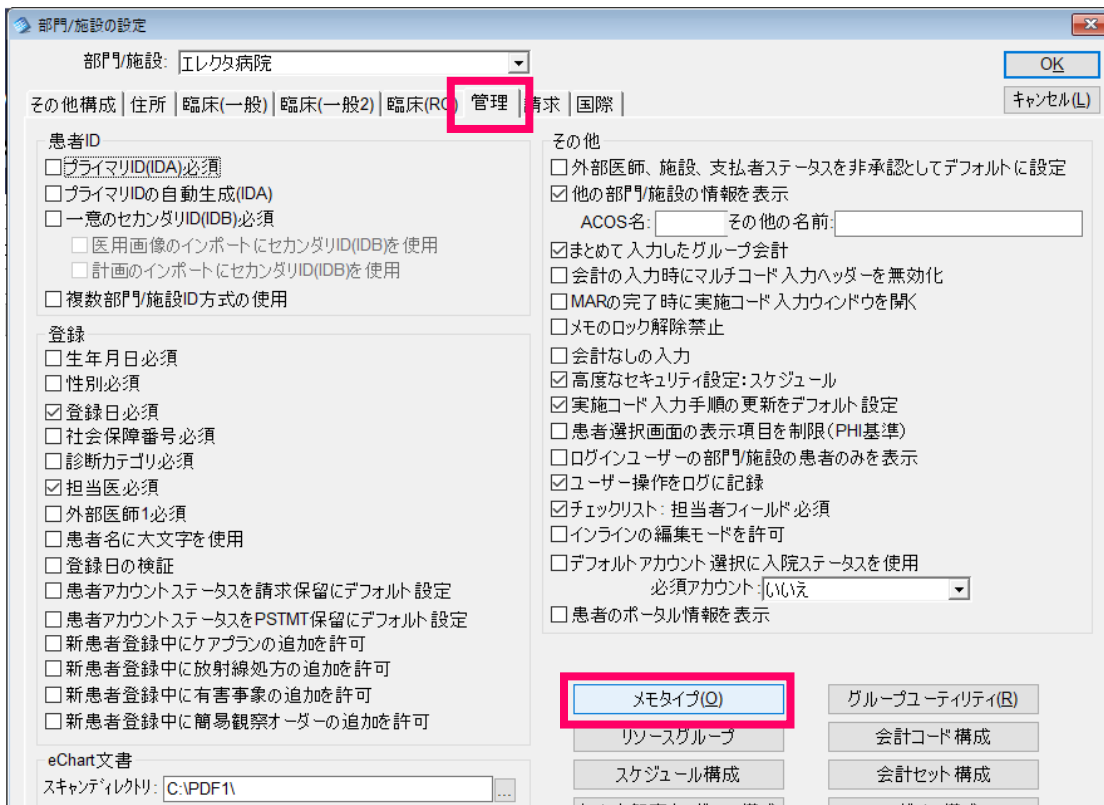

3) [メモタイプ] のウィンドウが表示されます。[追加] をクリックしてください。

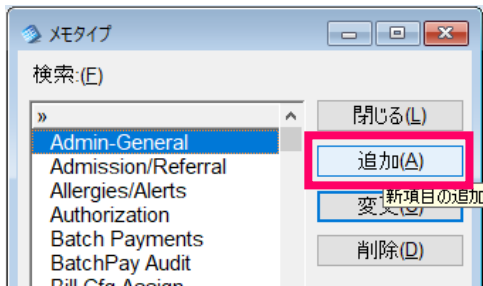

4) “プロンプト” に、メモタイプの名称を入力し、[OK] をクリックしてください。

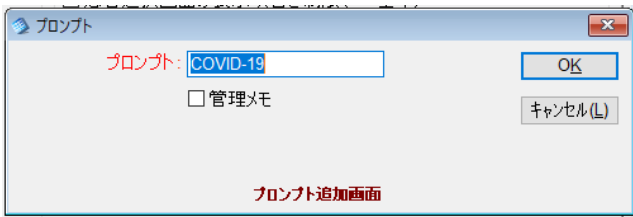

【参考】 COVID-19 のタブページのサンプル

例えば、下記のような画面レイアウトのカスタマイズが可能です。

**アセスメントの表示
データ追加**

日	2020/04/16	2020/04/17
時間	13:30 15:23 14:22	
COVID-19病室	職場内	不明 家庭内

スケジュール表示

日付時刻	到着時刻	ロケーション	実施内容	ステータス
2020/04/17 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/18 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/20 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/21 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/22 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/23 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/24 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/25 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/27 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV
2020/04/28 15:00		VersaHD	前立診IMRT (W)	CV

メモの表示

メモ一覧 - 作成日: 本日 更新日: 本日

メモID	カテゴリ	作成日	作成者
COVID-19	起床	2020/04/17 14:38:12	大塚

メモ詳細

ホテルにて宿泊中。
症状は安定している。

咳の症状あり。
治療担当者は引き続き、マスク・ガウンを着用

文書の表示・追加

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 問診票

患者氏名: エレクトア 一郎
患者ID: 9821
記入日: 2020年4月16日

2週間以内に下記症状がありましたか?

37.5℃以上の発熱	せき	味覚・嗅覚の異常	解熱薬の使用	だるさ	息苦しさ	鼻水	のどの痛み	下痢
あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	なし
なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

2週間以内の接触について
上記 (1) の症状がある方との濃厚接触はありましたか?
あり / なし

海外や県外の方との濃厚接触はありましたか?
あり / なし

新型コロナウイルス感染症の方やその濃厚接触者との接触はありましたか?
あり / なし


※(ありの場合) 場所: _____

【注意喚起を行うための設定方法】

患者を開いた際、COVID-19 に関する警告をポップアップで表示する

Headline


患者チャートを開いた際に、COVID-19 に関するポップアップメッセージを表示します。

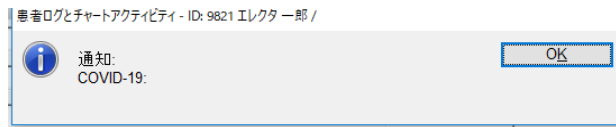


How To

1) 設定方法


- a. [ファイル] > [システムユーティリティ] > [患者ログの構成] をクリックしてください。

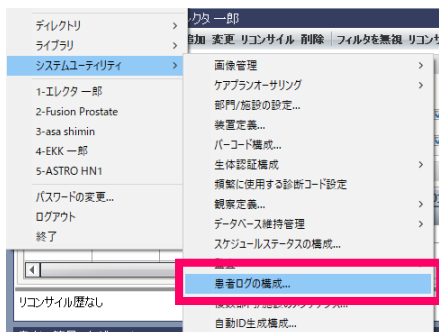

- b. “ログまたはチャートの実施内容リスト” のウィンドウが表示されます。[追加] をクリックしてください。

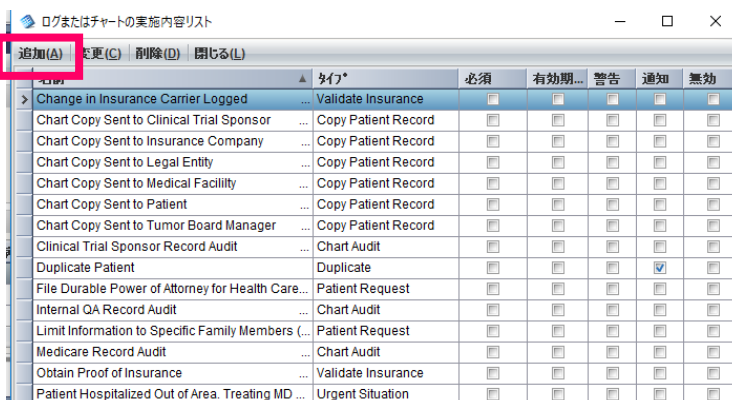

- c. “構成フォーム” のウィンドウが表示されます。タイプを “Notify” を選択し、名前を “COVID-19” と入力してください。“通知” にチェックを入れ、[保存] をクリックしてください。

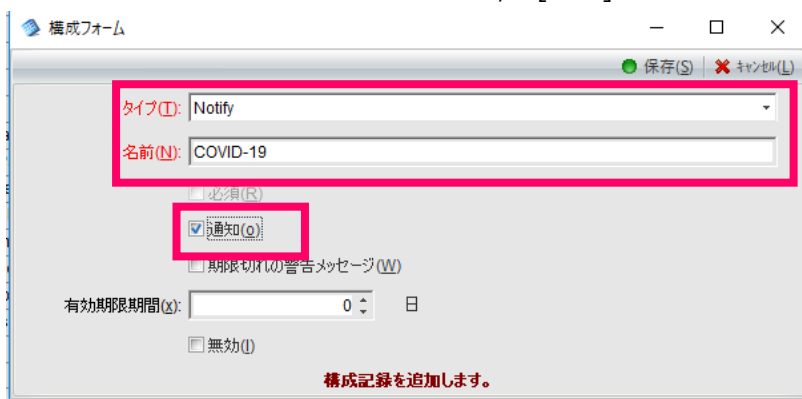

d. “COVID-19” の通知が追加されます.

ログまたはチャートの実施内容リスト


追加(A) 変更(C) 削除(D) 閉じる(L)

名前	タイプ*	必須	有効期...	警告	通知	無効
Change in Insurance Carrier Logged ...	Validate Insurance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Clinical Trial Sponsor ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Insurance Company ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Legal Entity ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Medical Facility ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Patient ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chart Copy Sent to Tumor Board Manager ...	Copy Patient Record	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clinical Trial Sponsor Record Audit ...	Chart Audit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> COVID-19	Notify	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duplicate Patient	Duplicate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
File Durable Power of Attorney for Health Care...	Patient Request	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internal QA Record Audit ...	Chart Audit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limit Information to Specific Family Members (...)	Patient Request	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicare Record Audit ...	Chart Audit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obtain Proof of Insurance ...	Validate Insurance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patient Hospitalized Out of Area. Treating MD ...	Urgent Situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2) 登録方法

- a. 患者の選択後, [ファイル] > [患者情報] をクリックしてください。

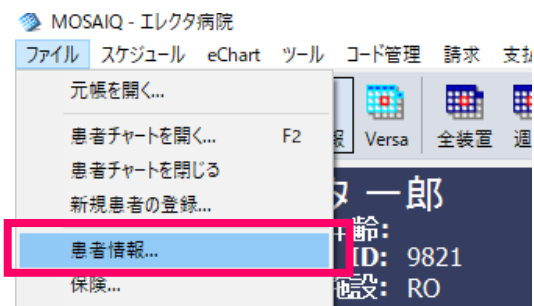

- b. "Patient Log" のタブを選択し, [追加] をクリックしてください。




- c. "ログまたはチャート実施内容" のウィンドウが表示されます。

"名前" のカテゴリにある, マークをクリックしてください。



d. “ログまたはチャート実施内容リスト” のウィンドウが表示されます。

“COVID-19” を選択し, [選択] をクリックしてください。

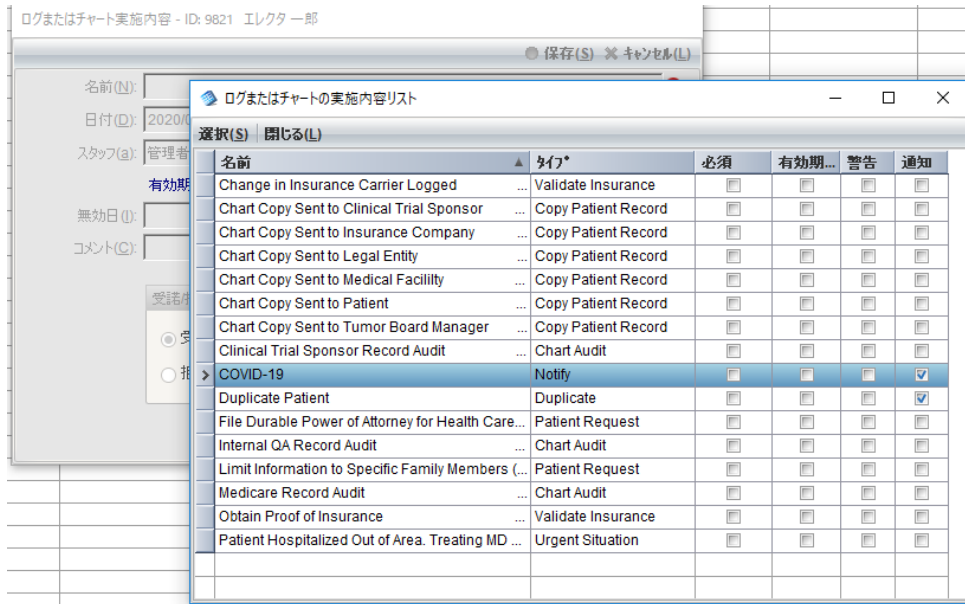


e. 患者に, COVID-19の通知が登録されます。



患者チャートの“注意事項”に、COVID-19に関する情報を表示する

Headline


COVID-19に関する情報を，“注意事項”に表示します。

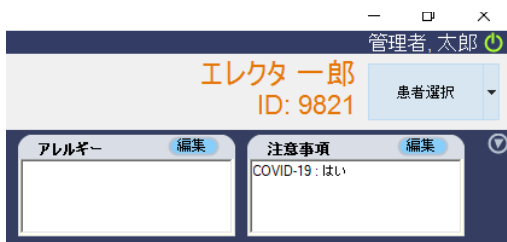


How To

1) 設定方法


- a. [ファイル] > [システムユーティリティ] > [観察定義] > [チャートビューと項目]をクリックしてください。

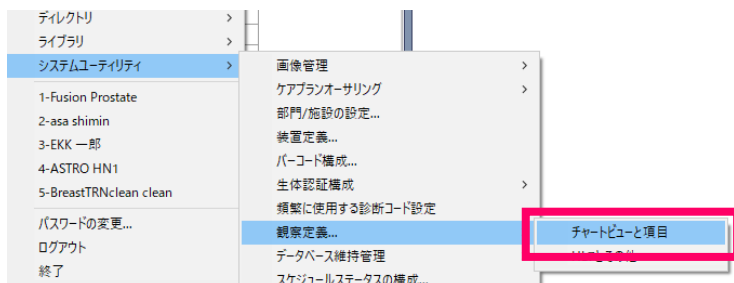

- b. “表項目”にチェックを入れ，“Alert types”を選択してください。

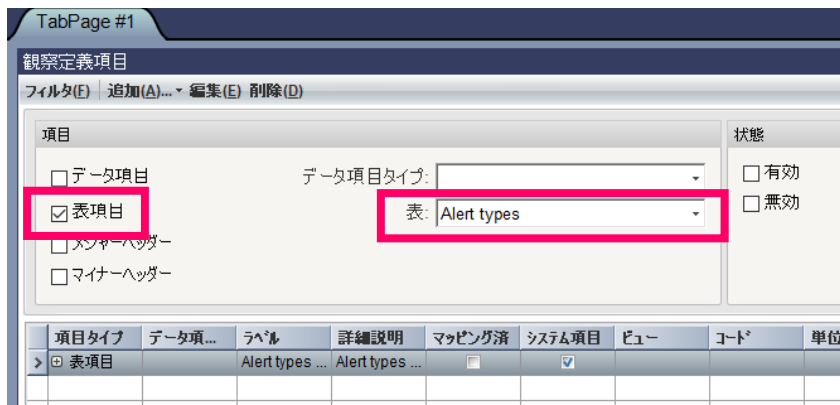

- c. 表示された項目を選択し，[追加] > [表項目コンテンツ]をクリックしてください。

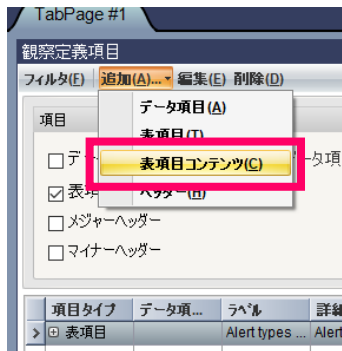


- d. “表項目コンテンツ” のウィンドウが表示されます。 “ラベル”, および “詳細説明” に, COVID-19 と記入してください。




2) 登録方法


- a. 患者選択後, [eCHART] > [アレルギーと注意事項]を選択してください。

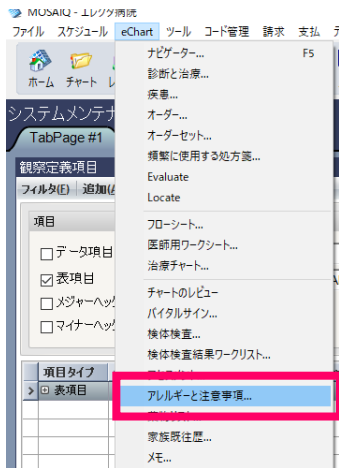

- b. “アレルギーと注意事項” のウィンドウが表示されます. [追加] > [注意事項] を選択してください。

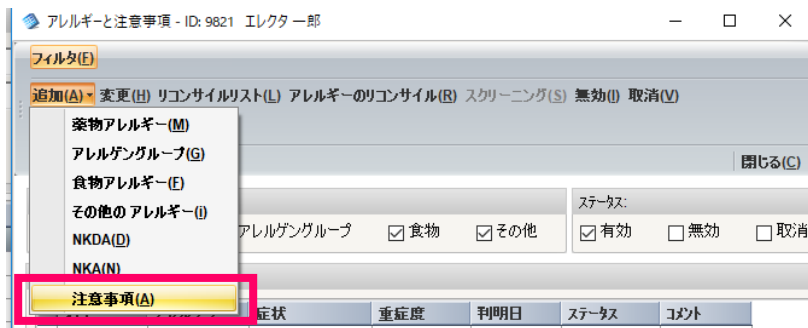

- c. “注意事項” の “タイプ” から, “COVID-19” を選択してください。

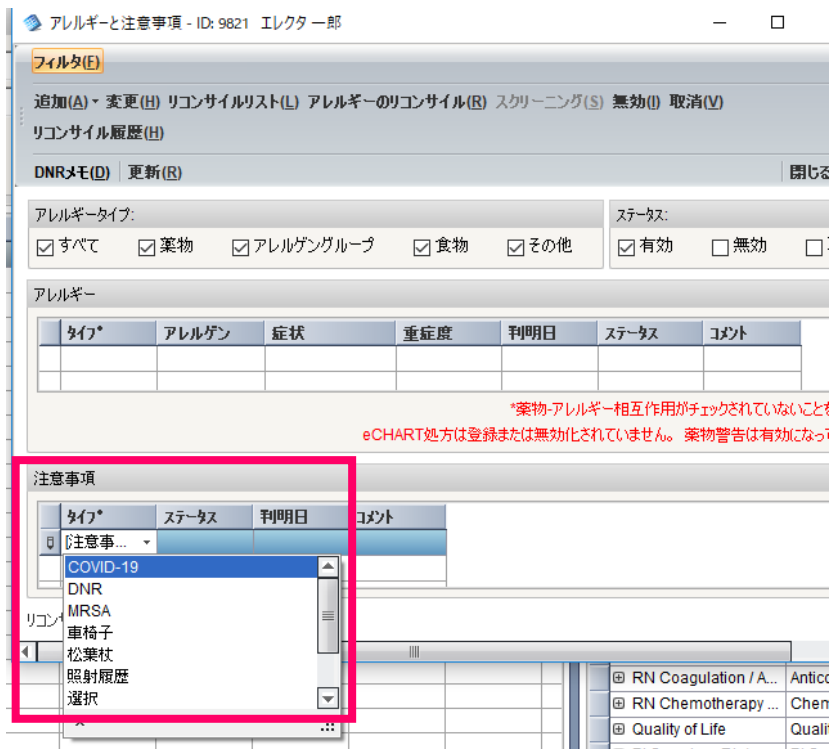

d. “判明日”の日付を選択してください。入力後，“閉じる”をクリックしてください。

The screenshot shows a software window titled "アレルギーと注意事項 - ID: 9821 エレクター部". It contains several sections:

- フィルタ(E)**: Includes buttons for "追加(A)", "変更(H)", "リコンサイルリスト(L)", "アレルギーのリコンサイル(R)", "スクリーニング(S)", "無効(I)", "取消(U)", "リコンサイル履歴(H)", "DNRメモ(D)", "更新(R)", and "閉じる(C)".
- アレルギータイプ:** Checkboxes for "すべて", "薬物", "アレルギーグループ", "食物", and "その他".
- ステータス:** Checkboxes for "有効", "無効", and "取消".
- アレルギー**: A table with columns: タイプ*, アレルゲン, 症状, 重症度, 判明日, ステータス, コメント.
- 注意事項**: A table with columns: タイプ*, ステータス, 判明日, コメント. One entry is visible: COVID-19, 有効, 2020/04/15.
- リコンサイル履歴なし**: A section for recording medication history.


A date selection calendar is open over the "判明日" field in the "注意事項" table. The calendar shows the month of April 2020, with the 15th highlighted. The calendar includes a "本日" (Today) button and a "年/月/日" label. To the right of the calendar, there are additional options for "年/月", "年", and "不明".



スケジュールを開いた際、COVID-19 に関する情報をポップアップで表示する

Headline


患者のスケジュールを開いた際に、COVID-19 に関する通知アラートを表示します。

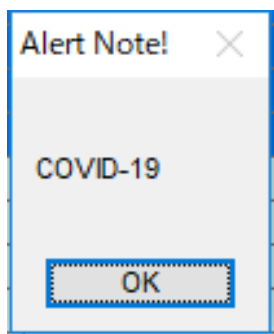

How To

1) 設定方法


- a. 患者のスケジュールを開いてください。

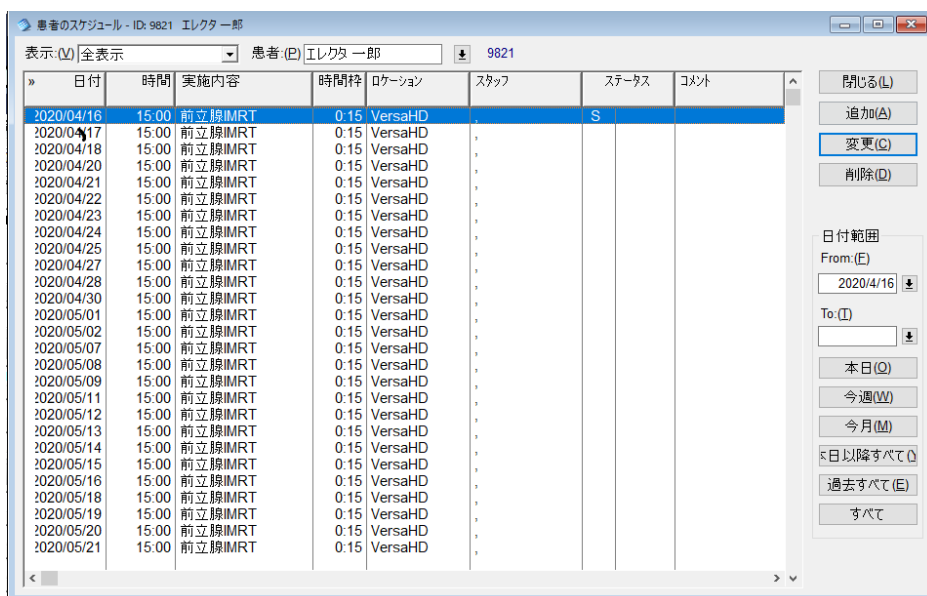


- b. 複数のスケジュールで、通知アラートを設定する場合は、患者スケジュール上で右クリックし、“繰り返し予約フォームでの編集” にチェックを入れてください。



- c. 通知アラートを設定するスケジュールを選択してください。または、すべてのスケジュールで設定を行う場合は、[全て選択] をクリック後、[変更] をクリックしてください。

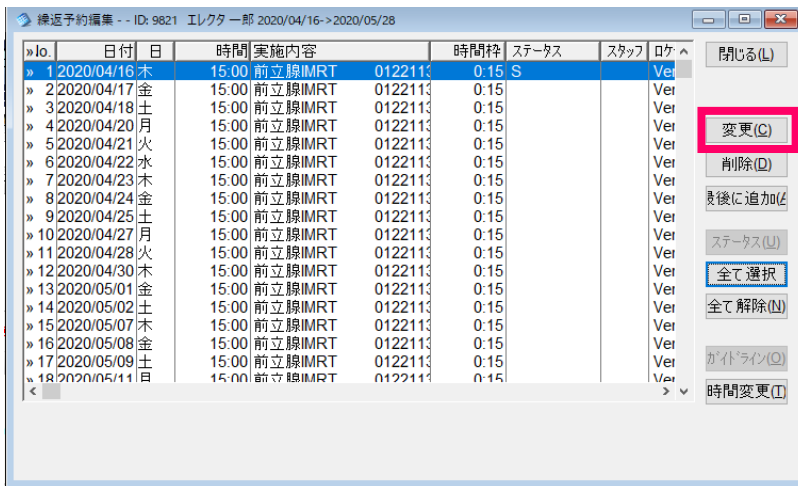

- d. 注意事項のチェックボックスにチェックを入れ、ラジオボタンは“事前”を選択してください。コメントのチェックボックスにチェックを入れ、コメント欄に“COVID-19” と入力し、[OK] をクリックしてください。

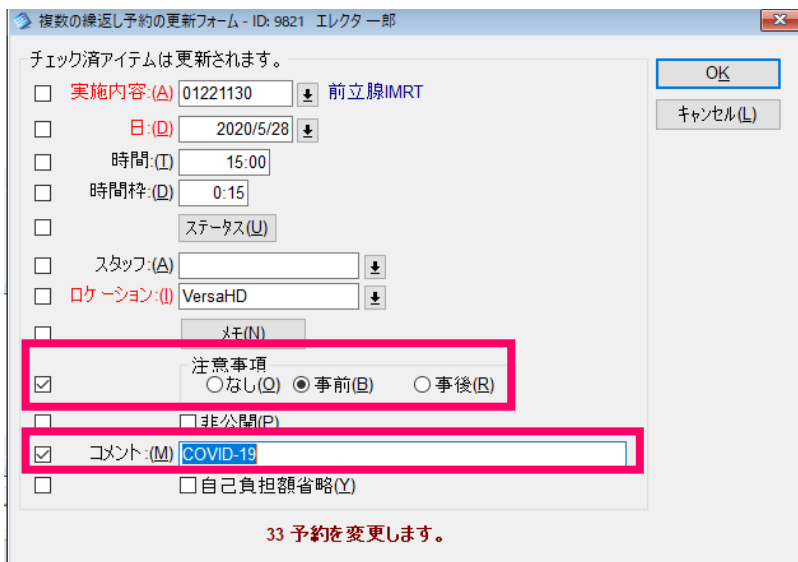

- e. スケジュールコメント、および通知アラートが設定されます。



患者スケジュールに、COVID-19 を示すステータスを設定する


Headline

COVID-19 に関するスケジュールステータスを追加し、スタッフに通知します。


How To

1) 設定方法


- a. [ファイル] > [システムユーティリティ] > [スケジュールステータスの構成] をクリックしてください。

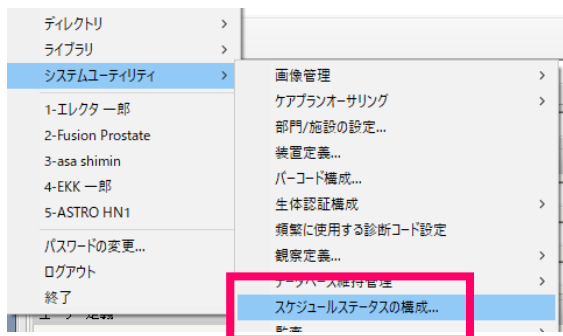

- b. “スケジュールステータス参照” のウィンドウが表示されます。[追加] をクリックしてください。

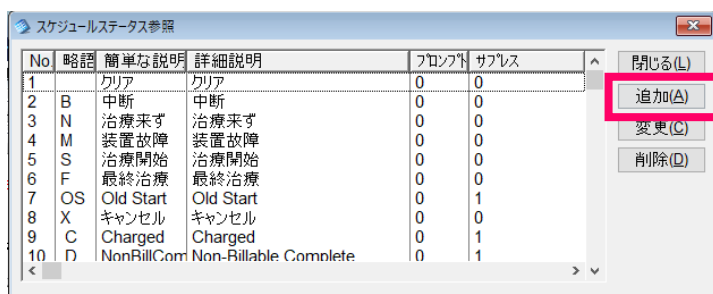


- c. “ユーザスケジュールのステータスを挿入” のウィンドウが表示されます。下記のようにテキストを入力し、“再スケジュールと削除時にユーザに警告” にチェックを入れてください。

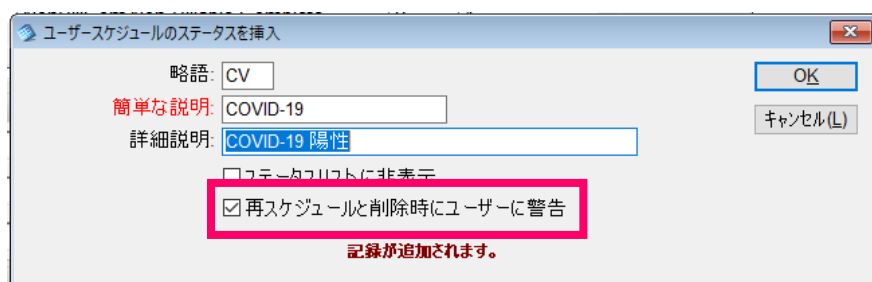

2) 登録方法


- a. 患者のスケジュールを開いてください。

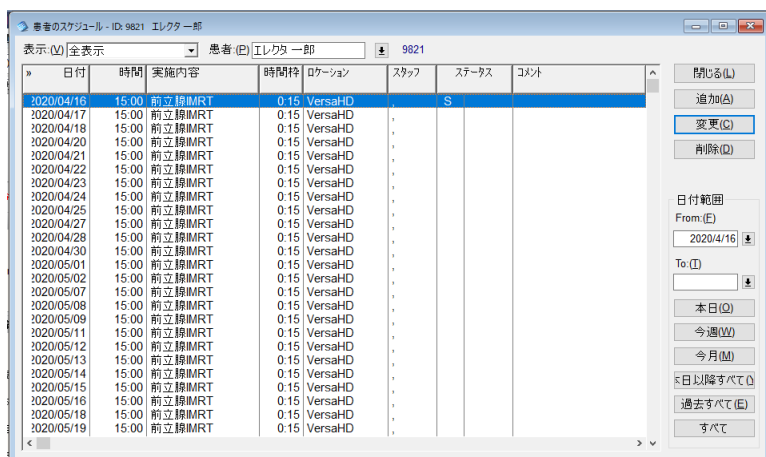

- b. 複数のスケジュールで、ステータスを設定する場合は、患者スケジュール上で右クリックし、“繰り返し予約フォームでの編集” にチェックを入れてください。



- c. スケジュールステータスを設定するスケジュールを選択してください。または、すべてのスケジュールで設定を行う場合は、[全て選択] をクリック後、[変更]をクリックしてください。

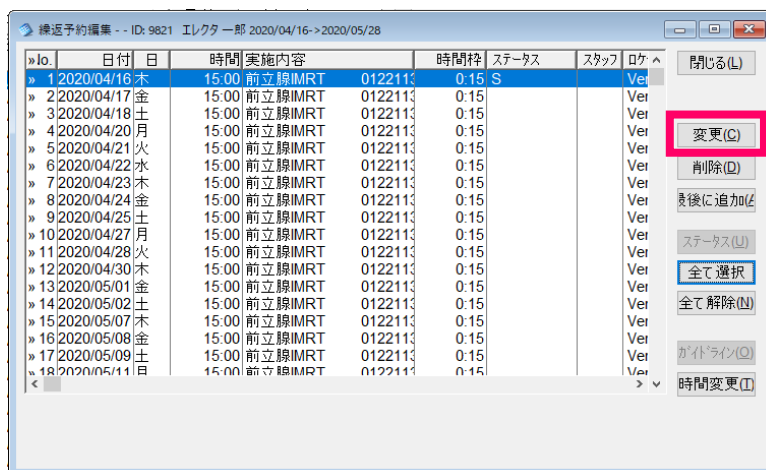

d. “ステータス” のチェックボックスにチェックを入れ, “ステータス” のボタンをクリックしてください。

複数の繰返し予約の更新フォーム - ID: 9821 エレクター部

チェック済アイテムは更新されます。

実施内容:(A) 01221130 前立腺IMRT

日:(D) 2020/5/28

時間:(T) 15:00

時間枠:(D) 0:15

ステータス(U)

スタッフ:(A)

ロケーション:(L) VersaHD

メモ(N)

注意事項
●なし(Q) ○事前(B) ○事後(R)

非公開(P)

コメント:(M)

自己負担額省略(Y)

OK
キャンセル(L)

33 予約を変更します。

e. “COVID-19” を選択してください。

複数の繰返し予約の更新フォーム - ID: 9821 エレクター部

チェック済アイテムは更新されます。

実施内容:(A) 01221130 前立腺IMRT

日:(D) 2020/5/28

時間:(T) 15:00

時間枠:(D) 0:15

ステータス
クリア
中断
治療未済
装置故障
治療開始
最終治療
キャンセル
COVID-19

スタッフ:(A)

ロケーション:(L) VersaHD

メモ(N)

注意事項
●なし(Q) ✓ COVID-19 ○事前(B) ○事後(R)

非公開(P)

コメント:(M)

自己負担額省略(Y)

OK
キャンセル(L)

33 予約を変更します。



f. COVID-19が選択されます。 [OK] をクリックしてください。

g. COVID-19の陽性を表すスケジュールステータス “CV” が追加されました。

No.	日付	日	時間	実施内容	時間枠	ステータス	スタッフ	ロケ
1	2020/04/16	木	15:00	前立腺IMRT	01221130	S,CV	Ver	Ver
2	2020/04/17	金	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
3	2020/04/18	土	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
4	2020/04/20	月	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
5	2020/04/21	火	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
6	2020/04/22	水	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
7	2020/04/23	木	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
8	2020/04/24	金	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
9	2020/04/25	土	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
10	2020/04/27	月	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
11	2020/04/28	火	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
12	2020/04/30	木	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
13	2020/05/01	金	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
14	2020/05/02	土	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
15	2020/05/07	木	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
16	2020/05/08	金	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
17	2020/05/09	土	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver
18	2020/05/11	日	15:00	前立腺IMRT	01221130	CV	Ver	Ver



【経過観察を行うための設定方法】


経過観察を行うため、COVID-19 に関するアセスメントを作成する

Headline


COVID-19 関連のアセスメントを作成します。

How To


- 1) [ファイル] > [システムユーティリティ] > [観察定義] > [チャートビューと項目]をクリックしてください。

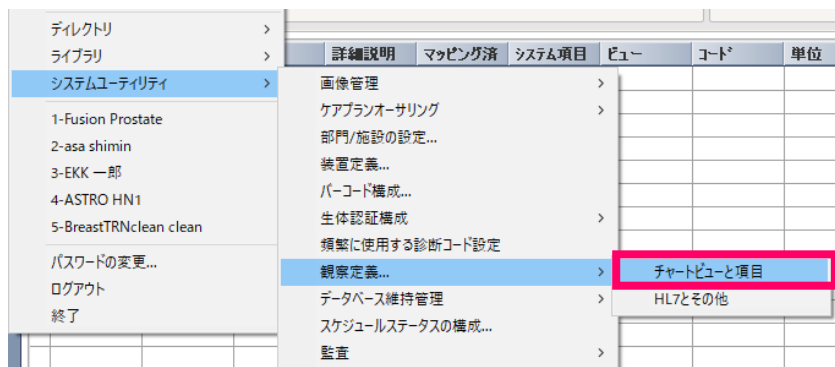

- 2) “観察定義項目” で、[追加] > [表項目]を選択し、新規表項目を作成してください

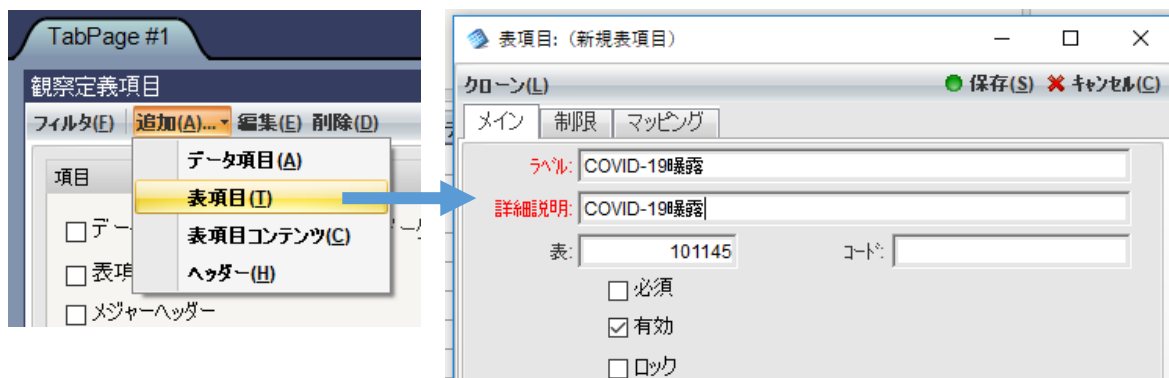

- 3) 新規表項目を作成後, [追加] > [表項目コンテンツ]を選択し, ラベルのテキストを入力してください。
同じ作業を繰り返し, 複数のラベルを作成してください。

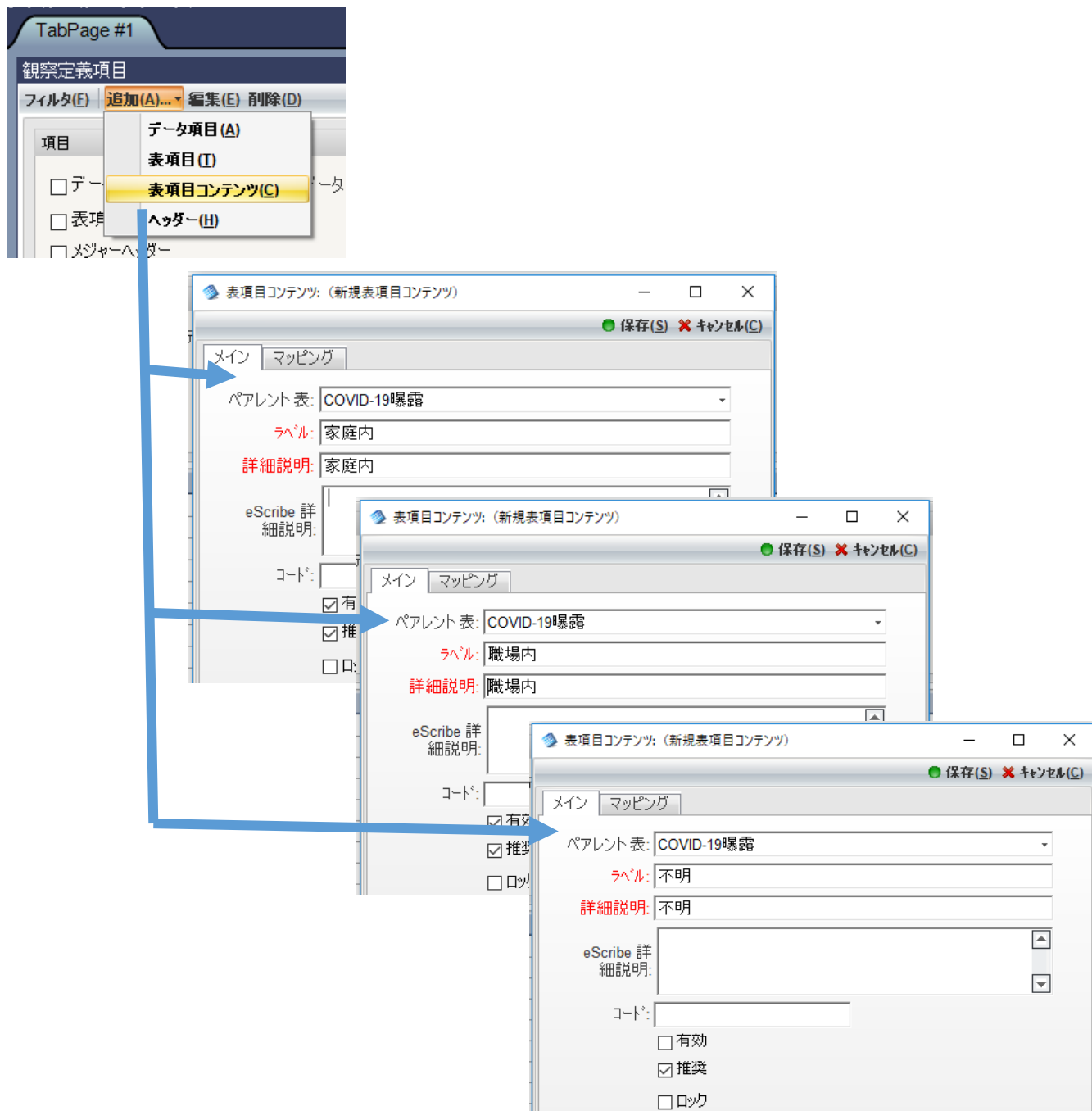


経過観察を行うため、COVID-19 に関するアセスメントを設定する

Headline


COVID-19 関連のアセスメントを設定します。

How To


- 1) [ファイル] > [システムユーティリティ] > [観察定義] > [チャートビューと項目]をクリックしてください。

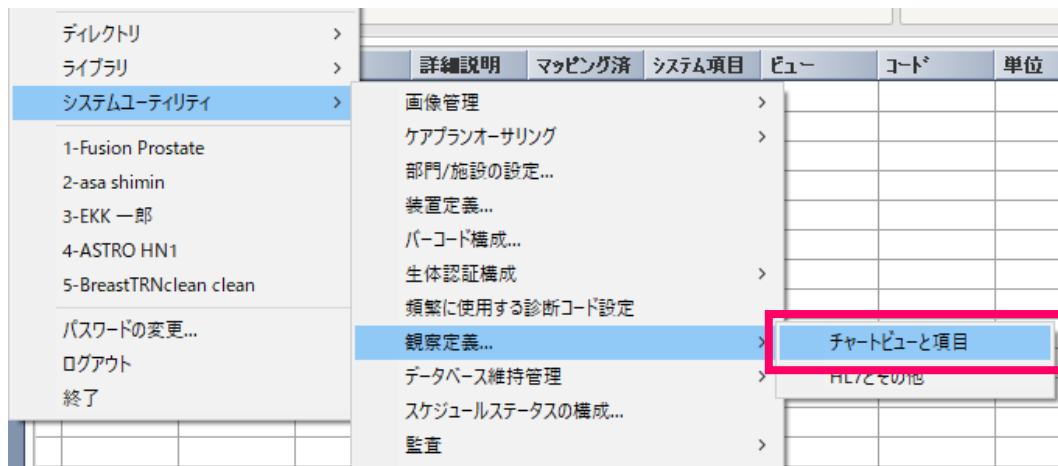



- 2) “ビュー” パネルで， [新規タブビューの追加]をクリックし， ラベルにテキストを入力してください。
ペアレントタブは “Assessments” を選択してください。

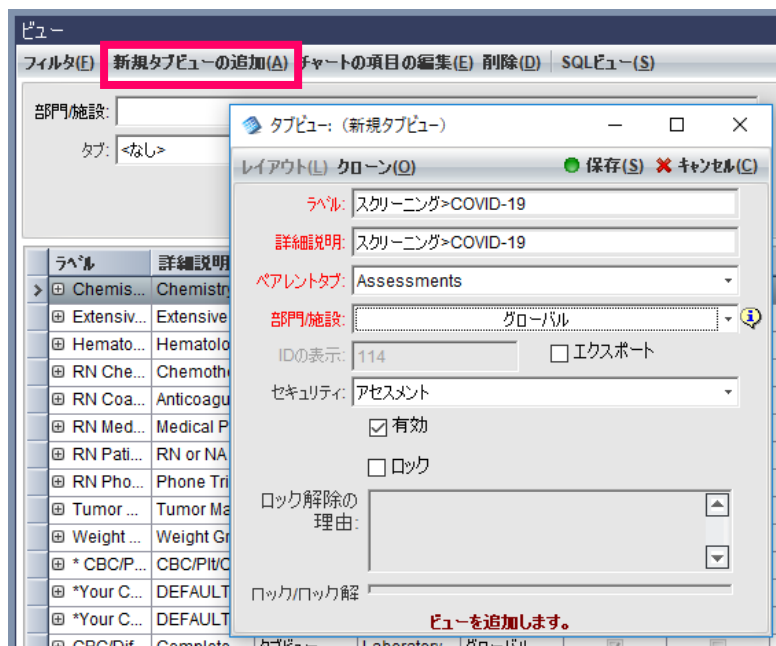

3) 2)で新規追加したアセスメントを選択してください。

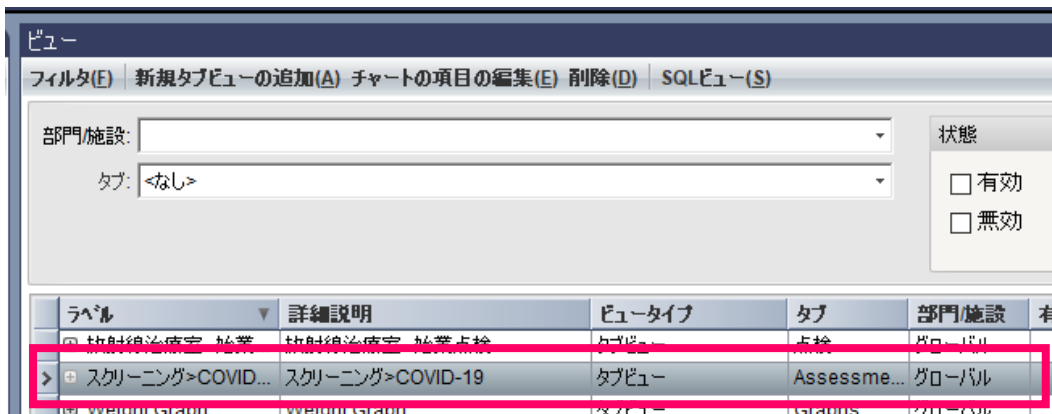

4) [チャート項目の編集]をクリックし、右側に表示された作成済の表項目「COVID-19曝露」を、左側の表にドラッグ&ドロップしてください。

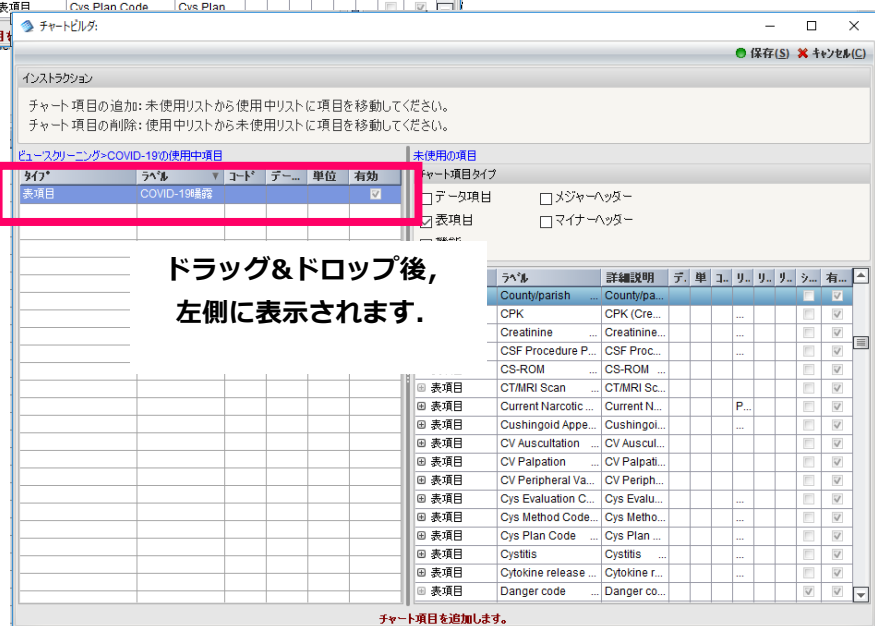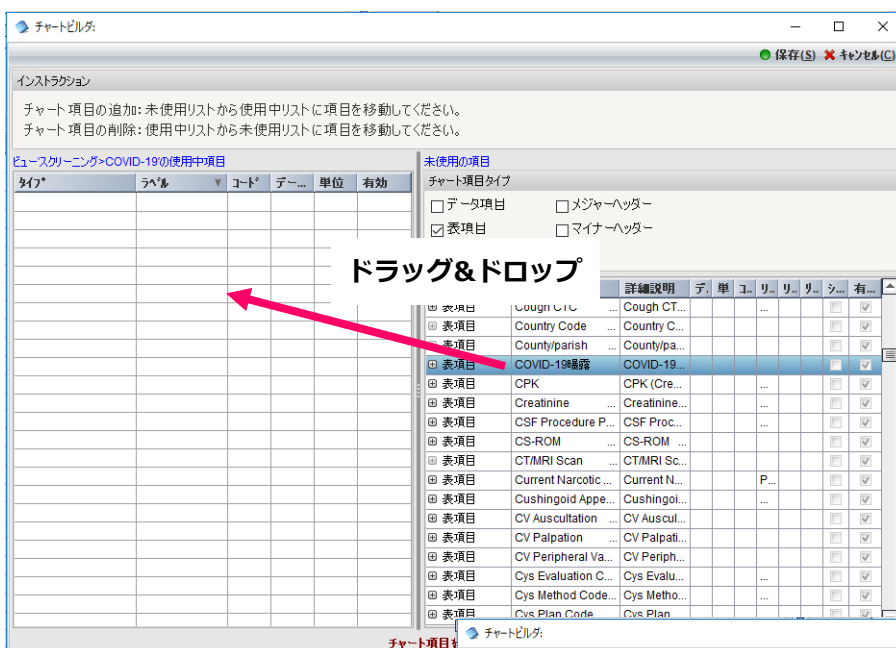


作成および設定したアセスメントを患者チャートに表示する


Headline

患者チャートビューワで、COVID-19のアセスメントに入力されたデータを表示、および追加を行います。


How To

1) 患者を選択し、患者チャートを開きます。

チャートタブから、マークをクリックし、[ワークスペースの構成] をクリックしてください。

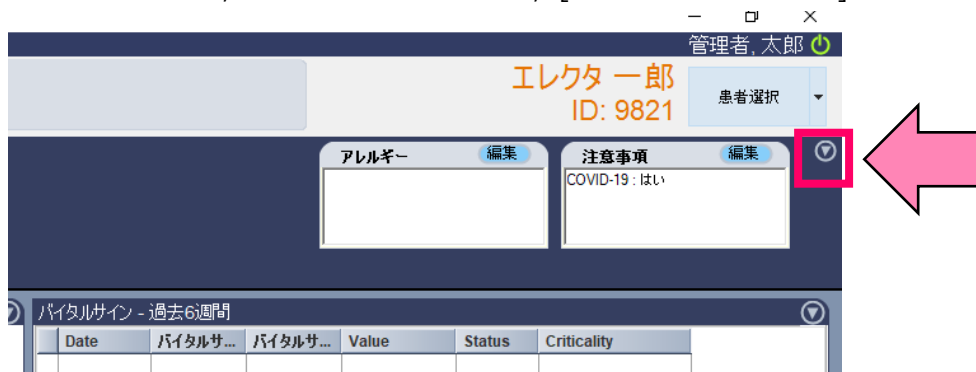


2) “マージフィールドビューワ” を選択し、任意の箇所にドラッグ&ドロップしてください。

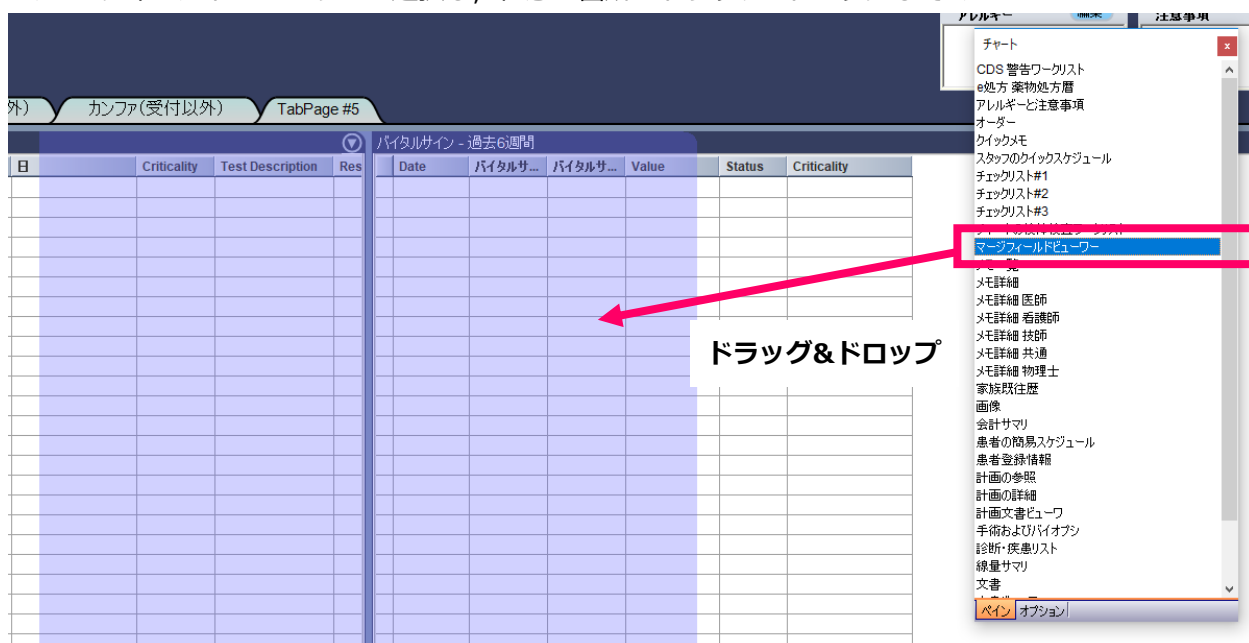

3) ワークスペースに、“マージフィールドビューワ”が作成されました。



4) “マージフィールド”のカテゴリに、“アセスメント”を選択してください。
その後、[構成]をクリックしてください。

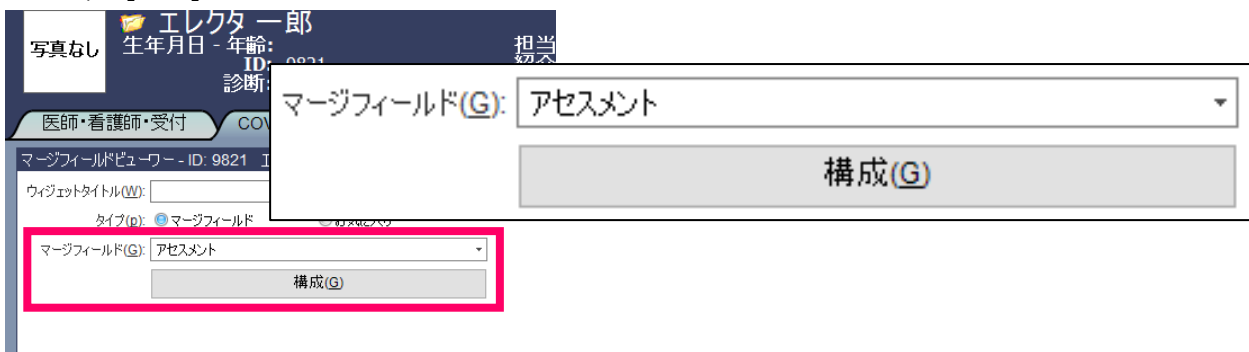


5) “eSCRIBEマージフィールド - アセスメント”のウィンドウが表示されます。


“選択済項目”を、ダブルクリック、または選択して、“項目の選択”をクリックしてください。




- 6) “現在選択中の項目” のウィンドウが表示されます。“表示” のリストから、COVID-19の項目を選択し、[OK] をクリックしてください。

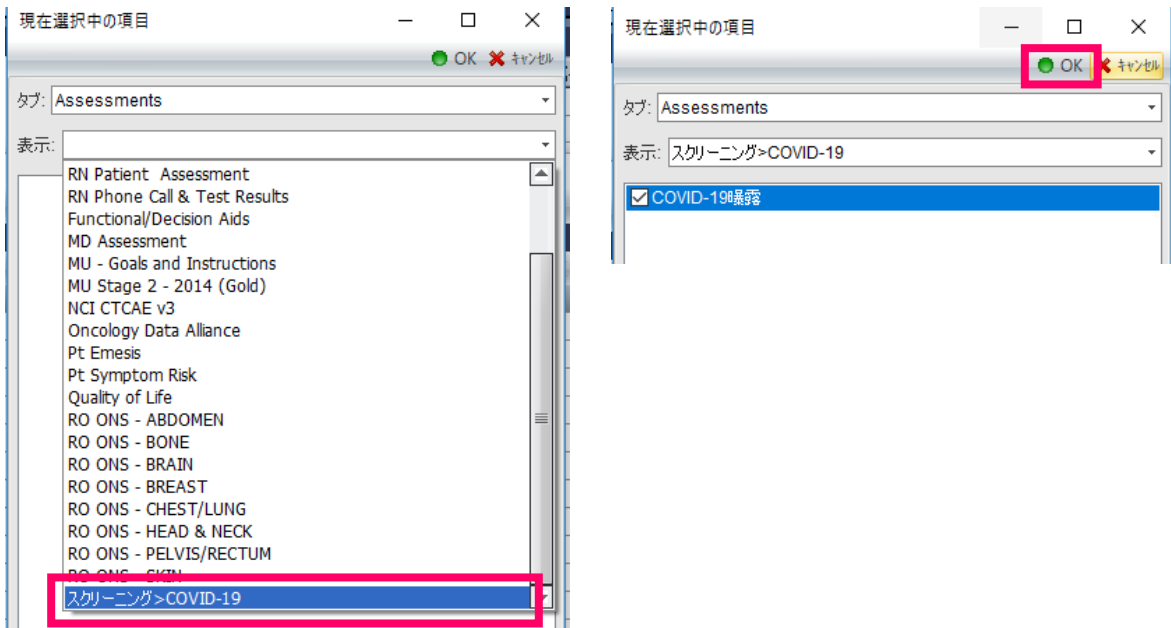


- 7) “日付範囲” は、“すべて” を選択すると、入力したすべてのデータが表示されます。

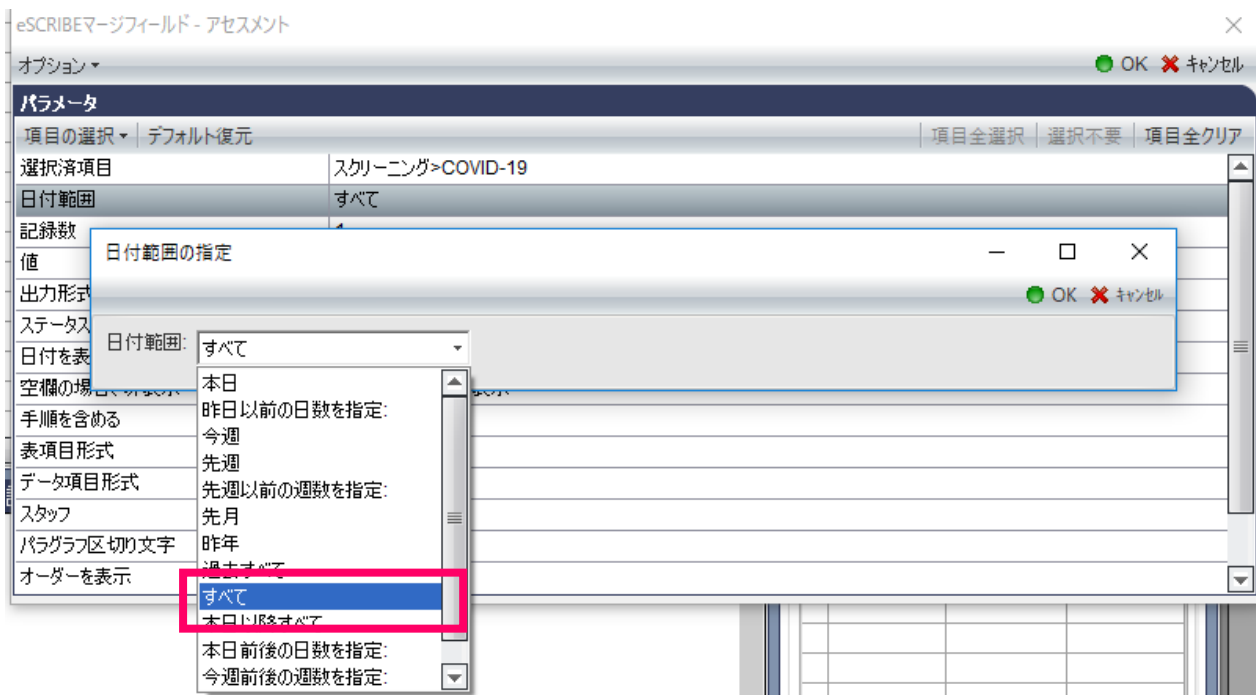

8) 条件を確認後, [OK] をクリックしてください。

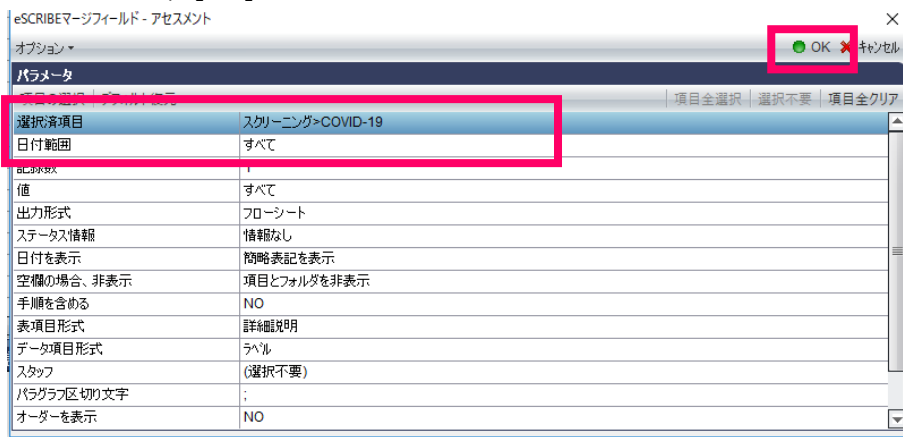

9) マージフィールドビューに, 登録した情報が表示されます。

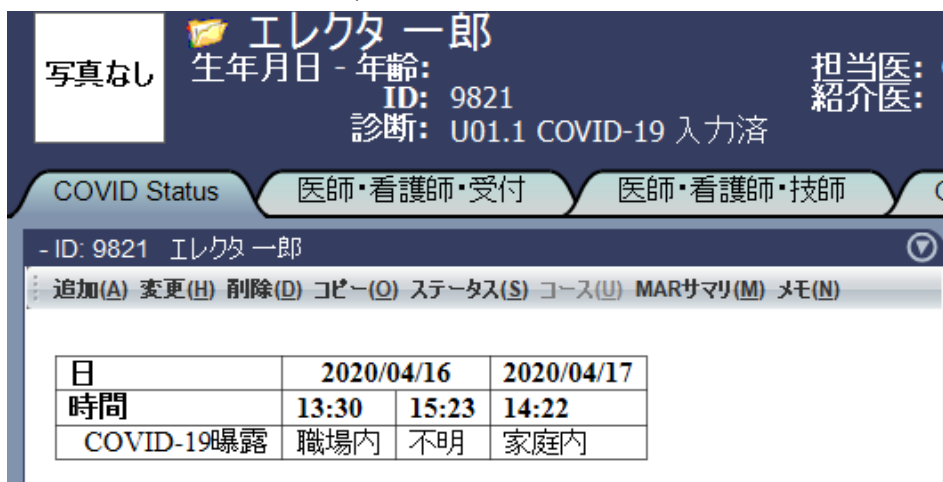

10) “追加” をクリックすると, 作成したアセスメントが表示され, データの追加をすることができます。経過観察など, 日ごとのデータを入力, 管理することが可能です。



COVID-19 の ICD コードを追加する


Headline

COVID-19 の ICD コードを追加し、患者の疾患リストに追加します。


How To

1) 設定方法

- a. [ファイル] > [ライブラリ] > [診断コード]をクリックしてください。

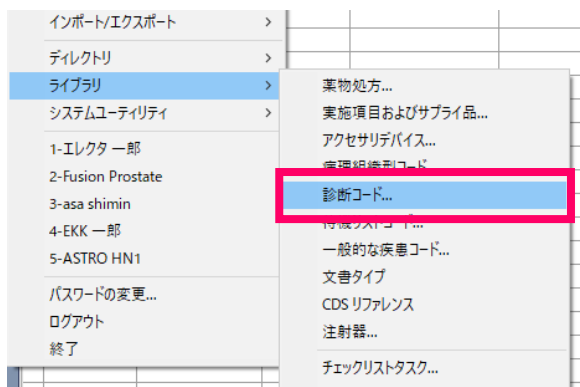

- b. “診断コード” のウィンドウが開きます。[追加] をクリックしてください。

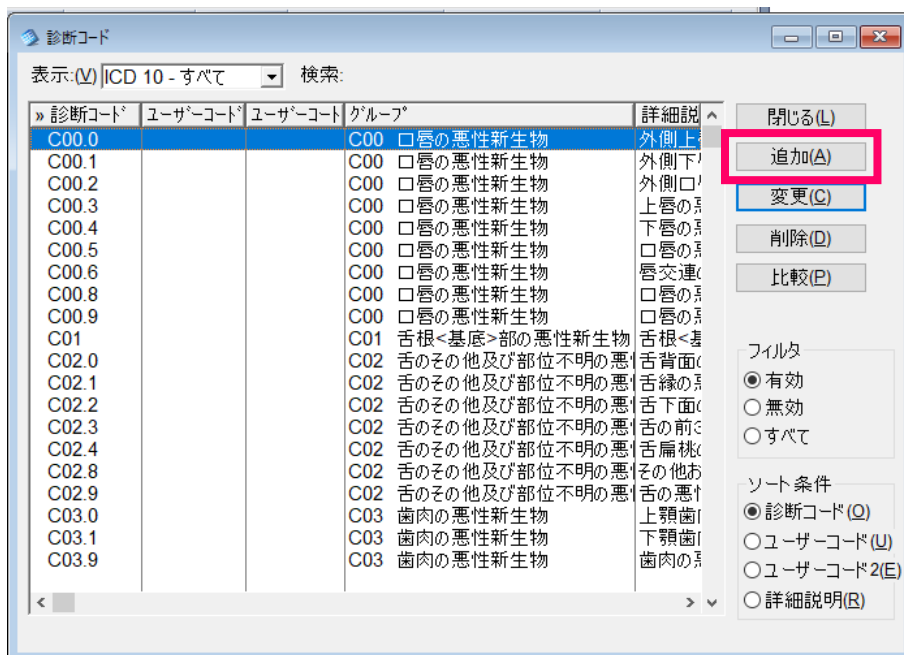

c. 下記のように、テキストを入力、または選択してください。

完了後、[OK] をクリックしてください。

診断コード

グループ(G) undefined

診断コード: U01.1

診断タイプ: ICD10

有効日(E) 2020/4/16 有効期限日(X)

ユーザーコード:

ユーザーコード2:

詳細説明: COVID-19

別の説明:

プライマリ

OK

キャンセル(L)

診断コード追加画面

d. 診断コードが追加されました。

診断コード

表示:(V) ICD 10 - すべて 検索:

診断コード	ユーザーコード	ユーザーコード	グループ	詳細説明
D82.8				Immunodef ass w oth spec
D83.0				Com var immunodef predon
D83.1				Com var immunodef predon
D83.2				Com var immunodef w auto
D83.8				Other common variable imm
D84.0				Lymphocyte function antigen
D84.1				Defects in the complement :
D84.8				Other specified immunodef
D84.9				Immunodeficiency unspecifi
D86.0				Sarcoidosis of lung
D86.1				Sarcoidosis of lymph nodes
D86.2				Sarcoidosis lung w lymph n
D86.3				Sarcoidosis of skin
D86.8				Sarcoidosis of other and coi
D86.9				Sarcoidosis unspecified
D89.0				Polyclonal hypergammaglob
D89.1				Cryoglobulinaemia
D89.2				Hypergammaglobulinaemia
D89.8				Other spec disord inv immu
U01.1			undefined	COVID-19

閉じる(L)

追加(A)

変更(C)

削除(D)

比較(B)

フィルタ

有効

無効

すべて

ソート条件

診断コード(Q)

ユーザーコード(U)

ユーザーコード2(E)

詳細説明(R)

e. [ファイル] > [ライブラリ] > [一般的な疾患コード] をクリックしてください。

インポート/エクスポート

ディレクトリ

ライブラリ

システムユーティリティ

1-エレクター部

2-Fusion Prostate

3-asa shimin

4-EKK 一部

5-ASTRO HN1

パスワードの変更...

ログアウト

終了

薬物処方...

実施項目およびサブライ品...

アクセサリデバイス...

病理組織型コード...

診断コード...

一般的な疾患コード...

CDS リファレンス


注射器...

チェックリストタスク...




f. “一般的な疾患コードの設定” のウィンドウが開きます。

[追加] をクリックしてください。

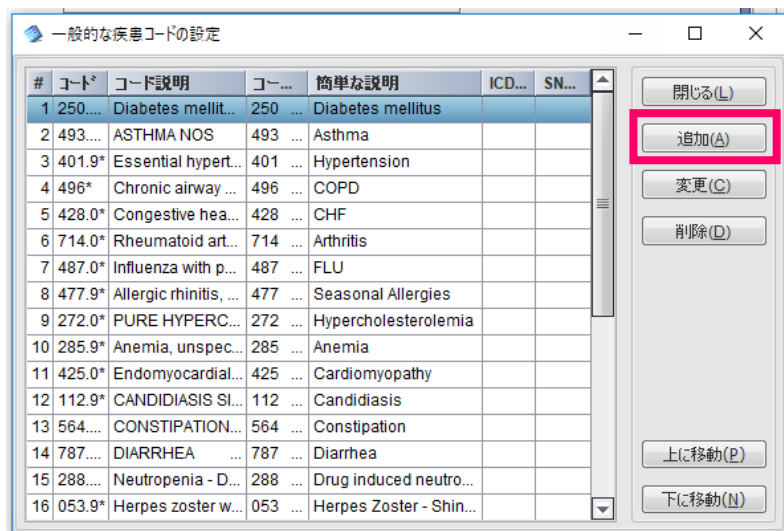


g. “疾患” に、作成したCOVID-19のコードを入力してください。

ICDコード “U01.1” を入力すると、自動的に選択されます。

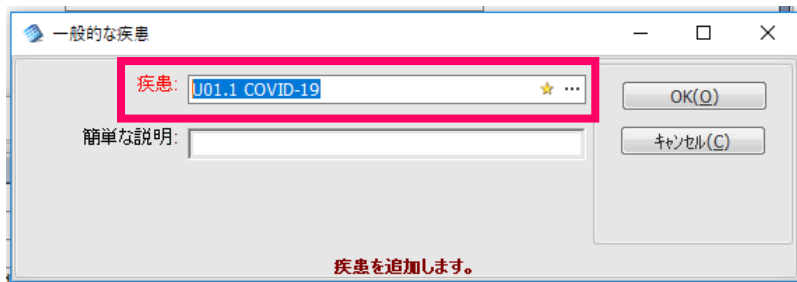

h. 疾患コードが入力されました。

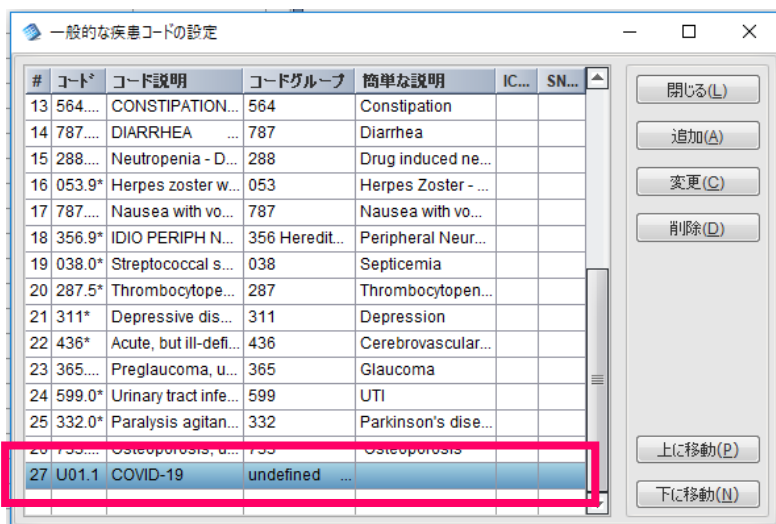

2) 登録方法


- a. 患者を選択後, [eCHART] > [疾患] をクリックしてください.




- b. “疾患” のウィンドウが開きます。[追加] をクリックしてください.



- c. COVID-19を選択し, [選択] をクリックしてください.

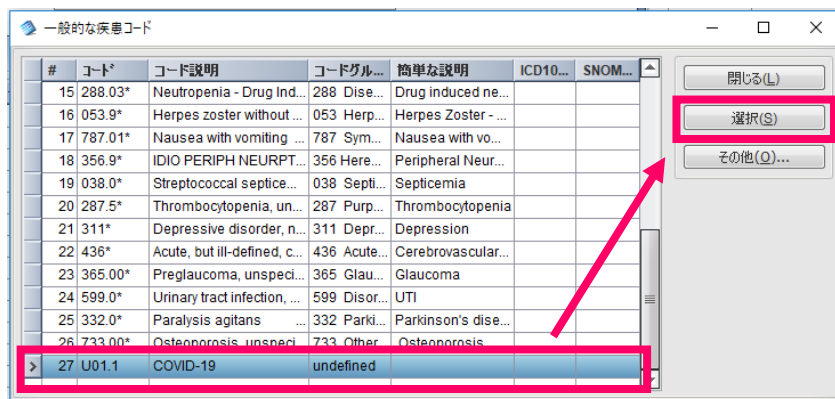

- d. COVID-19が追加されます。“タイプ” は“Problem” を選択し, [OK] をクリックしてください.

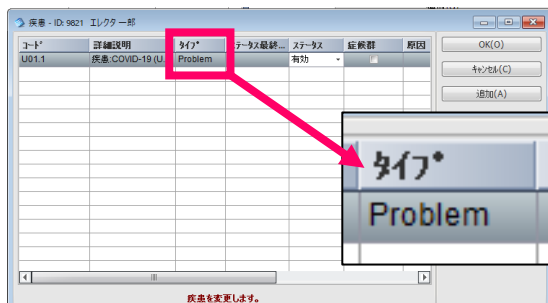

以上

