

Monaco の不均質補正機能を有効にご活用いただくために

～CT to ED ファントム レンタルサービスのご紹介～

Monaco では、患者画像の CT 値はまず相対電子密度に置き換えられます。プラン作成時の線量計算ではこの密度が必要になります。よって Monaco を利用するためには CT 値と相対電子密度の関係を専用のファントムを用いて測定し、テーブルとして Monaco に予め登録しておく必要があります。弊社では、ご希望のお客様に CT to ED ファントムのレンタルサービスをご提供しております。本サービスの詳細については、エレクトラ株式会社ケアサポートセンター ☎0120-659-043 までお問い合わせください。なお、台数に限りがございますので、ご希望通りのファントムをご用意できない場合があります。予約状況によってはお待ちいただく場合がありますので、ご了承くださいませよう、お願いいたします。


レンタル可能な CT to ED ファントム (Electron Density Phantom)

レンタル可能なファントムは以下の製品です。

図 1



GAMMEX Inc. : RMI 467

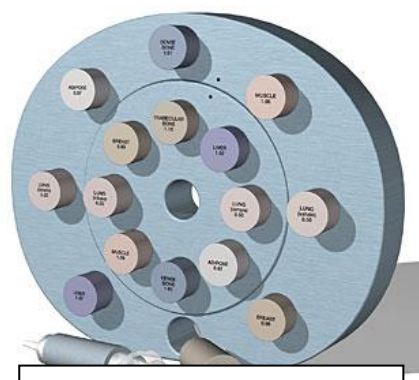

CIRS Inc. : Model 062

下記の弊社ウェブサイトにはレンタル可能な各 CT to ED ファントムの詳細なデータや CT to ED テーブル取得方法に関する資料を掲載しておりますので、あわせてご覧ください。



CT to ED ファントムやデータ取得に関する資料はこちらからどうぞ

エレクトラ株式会社ウェブサイト⇒物理サービス⇒お役立ち資料⇒CT-ED テーブル取得に関する資料